


GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

Y-Verteiler

Double-Extender

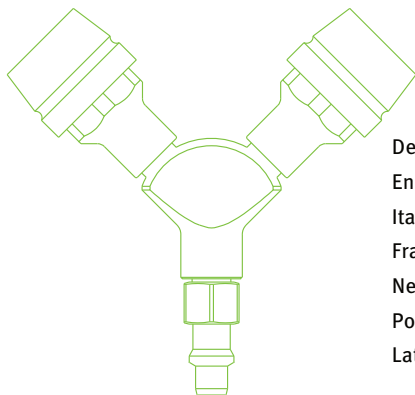

CE 0482

Deutsch	2
English	5
Italiano	8
Français	11
Nederlands	14
Polski	17
Latvian	20

Y-Verteiler



Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieses Greggersen Produkts. Für Fragen und Informationen steht Ihnen unser Sales- und Supportteam gerne zur Verfügung.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Bitte lesen Sie vor Benutzung des Medizinprodukts die Gebrauchsanweisung gründlich durch. Setzen Sie es nur ein, wenn Sie die Anwendung und Funktion komplett verstanden haben. Alle schwerwiegenden Vorkommnisse sind der Firma Greggersen Gasetechnik GmbH sowie der für den Wohnort zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden.



Medizinprodukt gemäß:

93/42/EWG
EN ISO 9170-1

NF S 90-116
SS 8752430

BS 5682 DIN EN ISO 13260-2
Medap

Symbole:



Gebrauchsanweisung
berücksichtigen



Hersteller



Herstellungszeitpunkt,
Kalenderwoche- Jahr



Kein Öl verwenden

Zweckbestimmung

Zum Anschluss von maximal zwei medizinischen Geräten an eine medizinische Gasentnahmestelle.

Funktionsweise

Der Y-Verteiler wird in eine Entnahmestelle für medizinische Druckgase oder Vakuum eingekuppelt. Über die Entnahmestellen wird dieses Druckgas oder Vakuum über zwei bereitgestellt.



Varianten

Der Y-Verteiler ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Gasarten O₂, AIR, AIR-800, VAC, CO₂, N₂O
- Gasstandards DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- in antimagnetischer Ausführung
- andere Ausführungen auf Anfrage


Warnhinweise

- der Gesamtdurchfluss der beiden Entnahmestellen wird durch die Leistung der Entnahmestelle begrenzt in die das Gerät eingekuppelt wird
- Y-Verteiler niemals in Reihe verbinden
- alle Anschlüsse immer öl- und fettfrei halten! Brandgefahr!
- nicht Rauchen und kein Feuer in der Nähe von Sauerstoffeinrichtungen



Zeichnung und Stückliste

1. Eingangsstecker
2. Entnahmestelle
3. Druckring

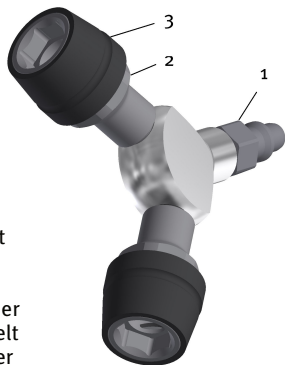

Bedienung

Vor jeder Inbetriebnahme ist eine äußere Sichtkontrolle und eine Funktionsprüfung durchzuführen. Y-Verteiler so in die Entnahmestelle einkuppeln, dass das Gerät Waagrecht ist, bzw. dass die Steckkupplungen nebeneinander stehen. Anschließend können bis zu zwei Geräte oder Niederdruck-Schlauchleitungen eingekuppelt werden. Nach dem Gebrauch die Geräte oder Niederdruck-Schlauchleitungen durch Drücken des Druckrings aus den Entnahmestellen auskuppeln. Y-Verteiler aus der Gasentnahmestelle auskuppeln.

Reinigung

Niederdruck-Schlauchleitungen mindestens monatlich mit einem Flächendesinfektionsmittel auf der Wirkstoffbasis von Aldehyden, quaternaren Ammoniumverbindungen oder Alkohol wisch desinfizieren. Nach der Reinigung muss das Produkt vollständig getrocknet werden. Es sind die Hygienepläne der Gesundheitseinrichtung zu beachten.

Wartung

Mindestens einmal jährlich ist die Funktion und die Dichtigkeit der Y-Verteiler zu überprüfen.

Entsorgung

Für dieses Gerät bestehen keine besonderen Anforderungen an die Entsorgung. Das Gerät kann im Hausmüll entsorgt werden. Sollte das Gerät kontaminiert sein, sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Technische Daten

zulässiger Prüfdruck:	1400 kPa
Betriebsdruck:	400...500 kPa
Gewicht:	ca. 450 g
Abmessungen:	(BxHxT) 160 x 320 x 150 mm
Temperaturbereich:	-10 °C - 40 °C
Lebensdauer:	10 Jahre
Klassifizierung:	nicht aktiv, nicht invasiv, Klasse IIa

Es besteht kein Gewährleistungsanspruch bei Schaden oder Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Transport, unsachgemäße Lagerung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Double-Extender



Dear customers,

Thank you for purchasing our Greggersen product.
If you have any questions or require information,
please contact our sales and support team.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Please read the instructions for use thoroughly
before using the medical device. Only use it once
you have completely understood the application and
function!

All serious incidents must be reported to
Greggersen Gasetechnik GmbH and to the health
authority responsible for the place of residence.



Medical device in accordance with:

93/42/EWG
EN ISO 9170-1

NF S 90-116 BS 5682
SS 8752430 Medap

DIN EN ISO 13260-2

Symbols:



Consult the
instructions for use



manufacturer



Date of manufacture
calendar week year



Keep free from
oil and grease

Intended use

For connecting a maximum of two medical devices to a medical gas outlet.

Functionality

The Double-Extender is coupled to an outlet for compressed medical gases
or vacuum. This compressed gas or vacuum is provided via two extraction
points.

Variants

The Double-Extender is available in the following versions:

- Gas types O₂, AIR, AIR-800, VAC, CO₂, N₂O
- Gas standards DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- in anti-magnetic design
- other versions on request

Warnings

- The total flow of the two gas outlets is limited by the output of the gas outlet into which the device is coupled.
- Never connect Y distributors in series
- Always keep all connections free of oil and grease! Fire hazard!
- No smoking or fire near oxygen equipment




Drawing and parts list

1. Input connector
2. Gas outlet
3. Pressure ring

Service

Before each use, an external visual inspection and a functional test must be carried out. Couple the Y-distributor into the tapping point in such a way that the device is horizontal or that the plug-in couplings are next to each other. Up to two devices or low-pressure hose lines can then be coupled. After use, uncouple the devices or low-pressure hose from the outlets by pressing the pressure ring. Uncouple the Y distributor from the gas extraction point.

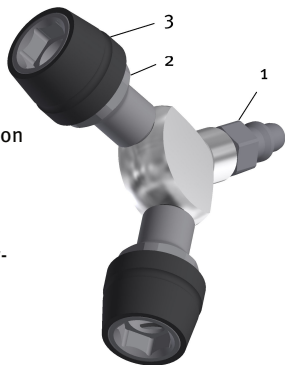

Cleaning

Wipe low-pressure hose lines at least once a month with a surface disinfectant based on the active substances aldehydes, quaternary ammonium compounds or alcohol. After cleaning, the product must be completely dried. The hygiene plans of the health facility must be observed.

Maintenance

The function and leak tightness of the Y-distributor must be checked at least once a year.

Disposal

There are no special disposal requirements for this device. The device can be disposed of in household waste. If the device is contaminated, use the appropriate precautions.

Technical specifications

permissible test pressure:	1400 kPa
Operating pressure:	400...500 kPa
Weight:	about 450g
Dimensions:	(WxHxD) 160 x 320 x 150 mm
Temperature range:	-10°C - 40°C
Lifetime:	10 years
Classification:	non-active, non-invasive, class IIa

There is no entitlement to rifle benefits in the event of damage or malfunctions caused by improper transport, improper storage or improper use.

Distributore Y



Egregi Clienti,

desideriamo cogliere questa occasione per Ringraziarvi per l'acquisto di questo prodotto Greggersen. Per eventuali domande e informazioni è a vostra disposizione il nostro team di addetti alle vendite e all'assistenza.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Vi preghiamo di leggere attenta mente fino in fondo le istruzioni per l'uso di questo dispositivo medico prima dell'utilizzo. Mettetelo in funzione solo quando ne avete compreso interamente l'utilizzo e il funzionamento.

Tutti gli eventi gravi vanno comunicati alla ditta Greggersen Gasetechnik GmbH e alle autorità sanitarie competenti per il luogo di residenza.



Dispositivo medico conforme a:

93/42/EWG
EN ISO 9170-1

NF S 90-116 BS 5682
SS 8752430 Medap

DIN EN ISO 13260-2

Simboli:



Consulta il
istruzioni per l'uso



Produttore



Tempo di fabbricazione,
settimana-anno



Non usare olio

Uso previsto

Per collegare un massimo di due dispositivi medici a un'uscita di gas medicale.

Funzionalità

Il distributore a Y è accoppiato ad un'uscita per gas medicali compressi o per vuoto. Questo gas compresso o vuoto viene fornito tramite le due uscite tramite due punti di estrazione.



Varianti

Il distributore Y è disponibile nelle seguenti versioni:

- Tipi di gas O₂, AIR, AIR-800, VAC, CO₂
- Norme gas DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- In design antimagnetico
- altre versioni su richiesta


Avvertenze

- La portata totale dei due punti di prelievo è limitata dall'uscita del punto di prelievo in cui è accoppiato il dispositivo.
- Non collegare mai distributori Y in serie
- Mantenere sempre tutti i collegamenti privi di olio e grasso! Pericolo d'incendio!
- Vietato fumare o incendiare vicino a apparecchiature per l'ossigeno



Disegno ed elenco delle parti

1. Connettore di ingresso
2. punto di campionamento
3. Anello di pressione

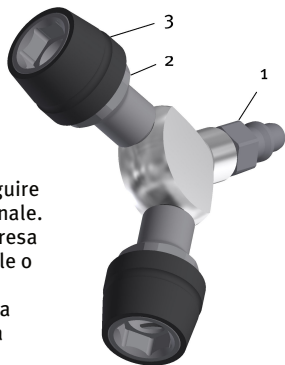

Servizio

Prima di ogni avviamento è necessario eseguire un'ispezione visiva esterna e un test funzionale. Accoppiare il distributore a Y nel punto di presa in modo tale che il dispositivo sia orizzontale o che gli innesti a innesto siano uno accanto all'altro. È quindi possibile accoppiare fino a due dispositivi o tubazioni flessibili a bassa pressione. Dopo l'uso, disaccoppiare i dispositivi o le tubazioni flessibili di bassa pressione dalle uscite premendo l'anello di pressione. Disaccoppiare il distributore a Y dal punto di estrazione del gas.

Pulizia

I tubi flessibili a bassa pressione devono essere disinfettati almeno una volta al mese con un disinfettante di superficie con ingrediente attivo a base di aldeidi, composti di ammonio quaternario o alcool. Dopo la pulizia, il prodotto deve essere completamente asciugato.

Manutenzione

Il funzionamento e la tenuta del distributore a Y devono essere controllati almeno una volta all'anno

Smaltimento

Per lo smaltimento di questo apparecchio non ci sono requisiti particolari. L'apparecchio può essere smaltito nei rifiuti domestici. Se l'apparecchio è contaminato, adottare precauzioni idonee.

Specifiche tecniche

pressione di prova ammessa:	1400 kPa
Pressione di esercizio:	400...500 kPa
Peso:	circa 450 g
Dimensioni:	(LxAxP) 160 x 320 x 150 mm
Intervallo di temperatura:	-10°C - 40°C
Durata della vita:	10 anni
Classificazione:	non attivo, non invasivo, classe IIa

Non vi è alcun diritto ai vantaggi del fucile in caso di danni o malfunzionamenti causati da trasporto improprio, conservazione impropria o uso improprio.

Distributeur Y

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Greggersen. Pour toutes questions et informations, notre équipe de vente et d'assistance se tient volontiers à votre disposition.



+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du dispositif médical avant de l'utiliser. Utilisez le dispositif uniquement après avoir entièrement compris son application et son fonctionnement!

Tout incident grave doit être signalé à la société Greggersen Gasetechnik GmbH et aux autorités sanitaires locales responsables.



Dispositif médical conforme aux normes suivantes:

93/42/EWG	NF S 90-116	BS 5682	DIN EN ISO 13260-2
EN ISO 9170-1	SS 8752430	Medap	

Symboles:



Tenez compte des instructions d'utilisation



Fabricant



Moment de la fabrication, semaine-année



Tenir à l'abri de huile et graisse

Utilisation prévue

Pour connecter un maximum de deux dispositifs médicaux à une prise de gaz médicaux.

Fonctionnalité

Le distributeur en Y est couplé à une sortie pour les gaz médicaux comprimés ou le vide. Ce gaz comprimé ou vide est fourni par les deux sorties via deux points d'extraction.

Variantes

Le distributeur Y est disponible dans les versions suivantes :

- Types de gaz O₂, AIR, AIR-800, VCA, CO₂
- Normes gaz DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- En conception antimagnétique
- autres versions sur demande


Avertissements

- Le débit total des deux points de prélèvement est limité par le débit du point de prélèvement auquel l'appareil est couplé.
- Ne connectez jamais les distributeurs Y en série
- Maintenez toujours toutes les connexions exemptes d'huile et de graisse ! Risque d'incendie!
- Interdiction de fumer ou de faire du feu à proximité d'un équipement à oxygène



Dessin et liste des pièces

1. Connecteur d'entrée
2. point de prélèvement
3. Anneau de pression

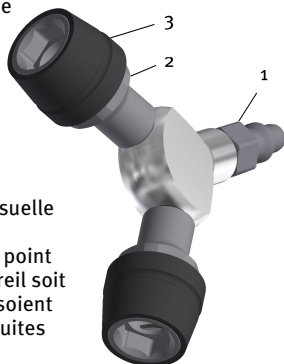

Service

Avant chaque démarrage, une inspection visuelle externe et un test fonctionnel doivent être effectués. Raccordez le distributeur en Y au point de prélèvement de manière à ce que l'appareil soit horizontal ou que les raccords enfichables soient côte à côte. Jusqu'à deux appareils ou conduites flexibles basse pression peuvent alors être couplés. Après utilisation, débranchez les appareils ou flexibles basse pression des sorties en appuyant sur la bague de pression. Désaccoupler le distributeur Y du point d'extraction de gaz.

Nettoyage

Désinfecter les conduites flexibles basse pression au moins une fois par mois en les essuyant avec un produit désinfectant de surface à base d'aldéhyde, de composés d'ammonium quaternaires ou d'alcool. Après le nettoyage, le produit doit être complètement sec. Les plans d'hygiène de l'établissement de santé doivent être respectés.

Maintenance

Le fonctionnement et l'étanchéité du distributeur en Y doivent être vérifiés au moins une fois par an

Élimination

Il n'existe pas d'exigences particulières pour l'élimination de cet appareil. L'appareil peut être éliminé avec les déchets ménagers. Si l'appareil est contaminé, des mesures de précaution appropriées doivent être prises.

Spécifications techniques

pression d'épreuve admissible :	1400 kPa
Pression de service :	400...500 kPa
Poids :	environ 450g
Dimensions :	(LxHxP) 160 x 320 x 150 mm
Plage de température :	-10°C - 40°C
Durée de vie :	10 ans
Classification :	non actif, non invasif, classe IIa

Il n'y a pas de droit aux prestations de carabine en cas de dommages ou de dysfonctionnements causés par un transport, un stockage ou une utilisation inappropriés.

Y Distributeur



Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van Greggersen. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij ons sales- en supportteam.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Lees voor gebruik van dit medische hulpmiddel de gebruiksaanwijzing eerst goed door. Pas het hulpmiddel alleen toe als u het gebruik en de werking helemaal begrijpt.

Meld alle ernstige voorvallen aan de firma Greggersen Gasetechnik GmbH en de gezondheidsinstanties die voor de locatie verantwoordelijk zijn.



Medisch hulpmiddelconform:

93/42/EWG
EN ISO 9170-1

NF S 90-116 BS 5682
SS 8752430 Medap

DIN EN ISO 13260-2

Symbolen:



Overweeg de gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Tijd van fabricage,
kalender week- jaar



Gebruik geen olie

Beoogd gebruik

Voor het aansluiten van maximaal twee medische apparaten op een medische gasuitgang.

Functionaliteit

De Y-verdeler is gekoppeld aan een uitlaat voor gecompriëerde medische gasen of vacuüm. Dit gecompriëerde gas of vacuüm wordt geleverd via de twee uitlaten via twee afzuigpunten.



Varianten

De Y-verdeler is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

- Gassoorten O₂, AIR, AIR-800, VAC, CO₂
- Gasnormen DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- In antimagnetisch ontwerp
- andere uitvoeringen op aanvraag


Waarschuwingen

- Het totale debiet van de twee aftappunten wordt begrensd door het vermogen van het aftappunt waarop het apparaat is gekoppeld.
- Sluit Y-verdelers nooit in serie aan
- Houd alle aansluitingen altijd vrij van olie en vet! Brandgevaar!
- Niet roken of vuur in de buurt van zuurstofapparatuur



Tekening en onderdelenlijst

1. Ingangsconnector
2. Bemonsteringspunt
3. Drukkring

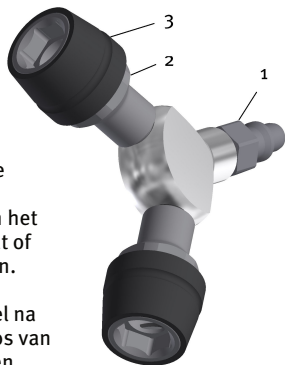

Onderhoud

Voor elke inbedrijfstelling moet een externe visuele inspectie en een functietest worden uitgevoerd. Koppel de Y-verdeler zodanig in het aftappunt dat het apparaat horizontaal staat of dat de steekkoppelingen naast elkaar liggen. Er kunnen dan maximaal twee apparaten of lagedrukslangen worden gekoppeld. Koppel na gebruik de apparaten of lagedrukslangen los van de uitgangen door op de drukring te drukken. Koppel de Y-verdeler los van het gasafzuigpunt.

Reiniging

Reinig lagedrukslangen minimaal eens per maand door wisdesinfectie met behulp van een desinfectiemiddel voor oppervlakken, op basis van aldehyden, quaternaire ammoniumverbindingen of alcohol. Efter rengøring skal produktet tørres fuldstændigt. Sundhedscentrets hygiejneplaner skal overholdes.

Onderhoud

De werking en dichtheid van de Y-verdeler moet minstens één keer per jaar gecontroleerd worden

Afvoer

Voor dit product is geen sprake van bijzondere eisen wat betreft de afvoer. Het apparaat mag met het huisvuil worden afgevoerd. Mocht het apparaat verontreinigd zijn, dan moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Technische specificaties

toelaatbare testdruk:	1400 kPa
Werkdruk:	400...500 kPa
Gewicht:	ongeveer 450g
Afmetingen:	(BxHxD) 160 x 320 x 150 mm
Temperatuurbereik:	-10°C - 40°C
Levensduur: 10 jaar	
Classificatie:	niet-actief, niet-invasief, klasse IIa

Bij schade of storingen veroorzaakt door ondeskundig transport, ondeugdelijke opslag of oneigenlijk gebruik bestaat geen recht op geweevoordelen.

Dystrybutor Y

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Greggersen.
W przypadku pytań i informacji do dyspozycji jest nasz zespół sprzedaży i wsparcia.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Przed użyciem wyrobu medycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia. Urządzenie należy stosować tylko po całkowitym zrozumieniu jego zastosowania i działania.

Wszystkie poważne incydenty należy zgłaszać firmie Greggersen Gasetechnik GmbH oraz organowi ds. zdrowia właściwemu dla miejsca zamieszkania.



Wyrób medyczny zgodny z:

93/42/EWG
EN ISO 9170-1

NF S 90-116 BS 5682
SS 8752430 Medap

DIN EN ISO 13260-2

Symbolika:



Rozważ instrukcje
użytkowania



Producent



czas produkcji,
tydzień- rok



Trzymaj się z dala od
olej i smar

Przeznaczenie

Do podłączenia maksymalnie dwóch urządzeń medycznych do wylotu gazów medycznych.

Funkcjonalność

Dystrybutor Y jest połączony z wylotem sprężonych gazów medycznych lub próżni. Ten sprężony gaz lub próżnia jest dostarczany przez dwa wyloty przez dwa punkty ekstrakcji.

Warianty

Dystrybutor Y występuje w następujących wersjach:

- Rodzaje gazów O₂, POWIETRZE, AIR-800, VAC, CO₂
- Normy gazowe DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- W konstrukcji antymagnetycznej
- inne wersje na zamówienie


Ostrzeżenia

- Całkowity przepływ w dwóch punktach poboru jest ograniczony przez moc punktu poboru, do którego podłączone jest urządzenie.
- Nigdy nie łącz rozdzielaczy Y szeregowo
- Wszystkie połączenia powinny być zawsze wolne od oleju i smaru!
Zagrożenie pożarowe!
- Zakaz palenia i ognia w pobliżu sprzętu tlenowego



Rysunek i lista części

1. Złącze wejściowe
2. punkt pobierania próbek
3. Pierścień dociskowy

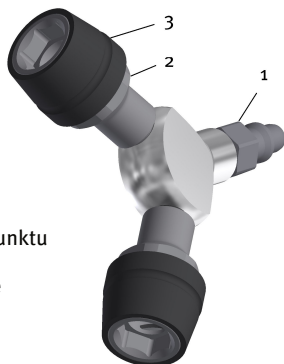

Usługa

Przed każdym uruchomieniem należy przeprowadzić zewnętrzne oględziny i test funkcjonalny. Podłączyć rozdzielacz Y do punktu poboru w taki sposób, aby urządzenia było ustawione poziomo lub aby złącza wtykowe znajdowały się obok siebie. Można wtedy podłączyć do dwóch urządzeń lub węży niskociśnieniowych. Po użyciu odłączyć urządzenia lub węże niskociśnieniowe od wylotów poprzez wciśnięcie pierścienia dociskowego. Odłączyć rozdzielacz Y od punktu poboru gazu.

Czyszczenie

Przewód niskociśnieniowy należy dezynfekować przez wycieranie przynajmniej raz w miesiącu środkiem do dezynfekcji powierzchniowej na bazie substancji czynnych aldehydów, czwartorzędowych związków amonowych lub na bazie alkoholu. Po oczyszczeniu produkt musi być całkowicie wysuszony. Należy przestrzegać planów higieny placówki zdrowia.

Konserwacja

Funkcjonowanie i szczelność rozdzielacza Y należy sprawdzać co najmniej raz w roku

Usuwanie

Dla tego urządzenia nie ma specjalnych wymagań dotyczących utylizacji. Urządzenie można usuwać razem z odpadami domowymi. Jeśli urządzenie jest zanieczyszczone, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Specyfikacja techniczna

dopuszczalne ciśnienie próbne: 1400 kPa

Ciśnienie robocze: 400...500 kPa

Waga: około 450g

Wymiary: (SxWxG) 160 x 320 x 150 mm

Zakres temperatur: -10°C - 40°C

Żywotność: 10 lat

Klasyfikacja: nieaktywna, nieinwazyjna, klasa IIa

W przypadku uszkodzeń lub awarii spowodowanych niewłaściwym transportem, niewłaściwym przechowywaniem lub niewłaściwym użytkowaniem, nie przysługuje prawo do świadczeń karabinowych.

Y izplatītājs



Szanowni Klienci!

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Greggersen.
W przypadku pytań i informacji do dyspozycji jest nasz zespół sprzedaży i wsparcia.

+49-(0)40 739357-0, sales@greggersen.de

Przed użyciem wyrobu medycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia. Urządzenie należy stosować tylko po całkowitym zrozumieniu jego zastosowania i działania.

Wszystkie poważne incydenty należy zgłaszać firmie Greggersen Gasetechnik GmbH oraz organowi ds. zdrowia właściwemu dla miejsca zamieszkania.



Medicīniskā ierīce saskaņā ar:

93/42/EWG

NF S 90-116

BS 5682

DIN EN ISO 13260-2

EN ISO 9170-1

SS 8752430

Medap

Simboli:



Lietošanas instrukcija
apsvērt



Ražotājs



izgatavošanas laiks,
kalendārā nedēļa- gads



Nelietojiet eļļu

Paredzētais lietojums

Maksimāli divu medicīnisko ierīču pievienošanai medicīniskās gāzes kontaktligzdai..

Funkcionalitāte

Y veida sadalītājs ir savienots ar saspiestu medicīnisko gāzu vai vakuuma izvadu. Šī saspiestā gāze vai vakuums tiek nodrošināts caur abām izejām caur diviem ekstrakcijas punktiem.



Varianti

Y izplatītājs ir pieejams šādās versijās:

- Gāzes veidi O₂, AIR, AIR-800, VAC, CO₂
- Gāzes standarti DIN, BS, NF, SS (AGA), Medap
- Antimagnētiskā dizainā
- citas versijas pēc pieprasījuma


Brīdinājumi

- Kopējo divu pieslēguma punktu plūsmu ierobežo tā piesūkšanās punkta jauda, kuram ierīce ir pievienota.
- Nekad nepievienojiet Y sadalītājus virknē
- Vienmēr turiet visus savienojumus tīrus no eļļas un smērvielas! Ugunsbīstamība!
- Skābekļa iekārtu tuvumā nedrīkst smēķēt vai aizdegties



Rasējums un detaļu saraksts

1. Ievades savienotājs
2. Paraugu ņemšanas vieta
3. Spiediena gredzens

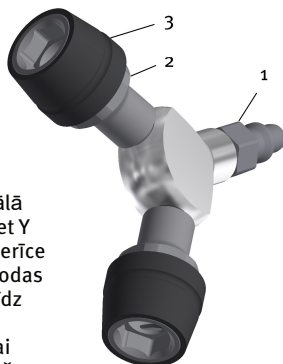

Apkalpošana

Pirms katras palaišanas ir jāveic ārējā vizuālā pārbaude un darbības pārbaude. Savienojiet Y veida sadalītāju pieslēguma punktā tā, lai ierīce būtu horizontāla vai spraudsavienojumi atrodas blakus viens otram. Pēc tam var pievienot līdz divām ierīcēm vai zema spiediena šļūtenu līnijām. Pēc lietošanas atvienojiet ierīces vai zemspiediena šļūtenes no izvadiem, nospiežot spiediena gredzenu. Atvienojiet Y sadalītāju no gāzes ieguves punkta.

Tīrīšana

Dezinficējiet zemspiediena šļūteņu līnijas vismaz reizi mēnesī ar virsmu dezinfekcijas līdzekli, kura pamatā ir aldehīdi, ceturtā amonija savienojumi vai spirts. Pēc tīrīšanas produkts ir pilnībā jāizžāvē.

Jāievēro veselības iestādes higiēnas plāni.

Apkope

Vismaz reizi gadā jāpārbauda Y veida sadalītāja darbība un hermētiskums

Iznīcināšana

Šai ierīcei nav īpašu izmešanas prasību. Ierīci var izmest sadzīves atkritumos. Ja ierīce ir piesārņota, jāveic atbilstoši piesardzības pasākumi.

Tehniskās specifikācijas

pieļaujamais pārbaudes spiediens: 1400 kPa

Darba spiediens: 400...500 kPa

Svars: apmēram 450 g

Izmēri: (PxAxG) 160 x 320 x 150 mm

Temperatūras diapazons: -10°C - 40°C

Dzīves ilgums: 10 gadi

Klasifikācija: neaktīva, neinvazīva, IIa klase

Nav tiesību uz šautenes pabalstiem bojājumu vai darbības traucējumu gadījumā, kas radušies nepareizas transportēšanas, nepareizas uzglabāšanas vai nepareizas lietošanas dēļ.

[illegible]



www.greggersen.de

GREGGERSEN Gasetechnik GmbH / Bodestr. 27-31 / 21031 Hamburg / Germany

2022-07-20 / M.Oels/806127-00 Gebrauchsanweisung Y-Verteiler