


Umschaltanlage MediControl MC2025R

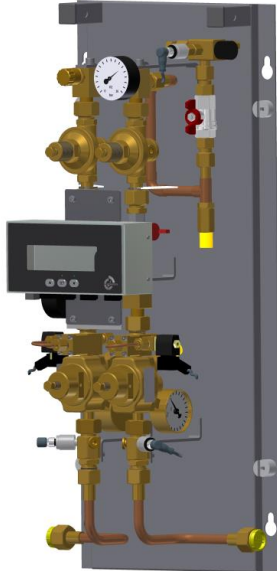

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 326026

Beschreibung

Umschaltanlage MediControl 2025R

Leistung: 25 m³/h

Vordruck: max. 200 bar

Hinterdruck: 5 bar +/- 0,5 bar

elk. Anschluss: 230 V AC

Systemsprache: Deutsch

Modus: 2 Flaschenbatterien und Reserveversorgung

Gasart: ++++++

Bestehend aus:

1 x MC2025

1 x Set Rohre MC2025 + Eingangsrohr Reserve

Mikroprozessor-gesteuerte Gasversorgungsanlage für 2-seitige Flaschenversorgung, Ausführung nach DIN EN ISO 7396-1, LCD-Display mit Angaben des Betriebszustands u. Servicemeldungen im Klartext, Weiterl. der

Meldungen über potentialfreie Kontakte, sensorische Drucküberwachung, 2-stufige Druckreduzierung, 2.Stufe doppelt ausgelegt, pneum. Vorrangschaltung bei Netzausfall, mit Manometern und Noteinspeisemöglichkeit (NIST), komplett montiert auf Montageplatte inkl. Haube; inkl. Anschlussmöglichkeit für Reserveversorgung