


Vakuumreg. Pirol 2.0 -90,VAC,SCHIEN,CH

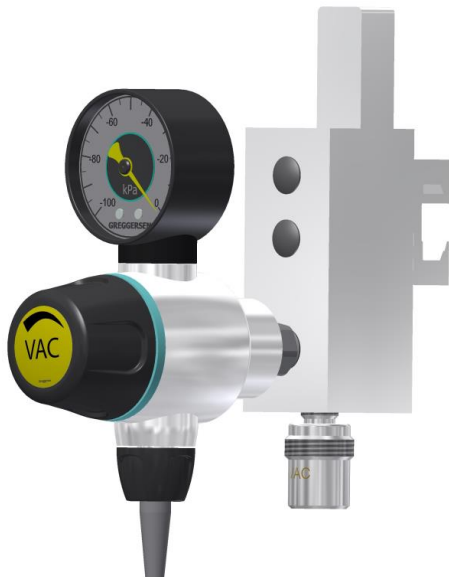

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505641

Beschreibung

Vakuumregler Pirol -90, Schienengerät CH, NIST
mit federbelasteter Schienenklemme für bis zu 50 mm Schienen

Medizinischer Vakuumregler zur Dosierung des Vakuums.

Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches
Einstellhandrad; Schienengerät inkl. federbelasteter
Schienenklemme.

Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und
intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare
Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des
eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.

Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 10079-3 (high vacuum /high flow).

Material:

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: Kunststoff

Schienenklemme: Aluminium, eloxiert

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: NIST-Gehäuse gemäß DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -90 kPa

Leistung: >20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle