


Umschaltanlage MediControl MC2025P

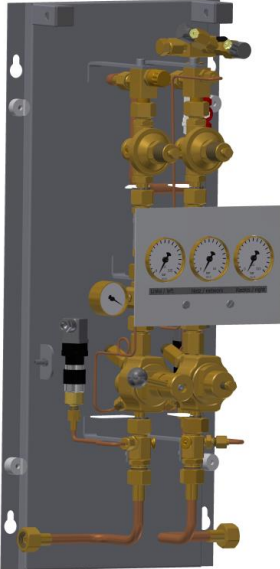

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 327025

Beschreibung

Umschaltanlage MediControl 2025P

Leistung: 25 m³/h

Vordruck: max. 200 bar

Hinterdruck: 5 bar +/- 0,5 bar

Gasart: ++++++

Bestehend aus:

1 x MC2025P

1 x Set Rohre MC2025P

Pneumatisch-gesteuerte Gasversorgungsanlage für zweiseitige Flaschenbatterieversorgung, Ausführung nach DIN EN ISO 7396-1, automatische Umschaltung, Vorrangschaltung mit Hebel, manometrische Anzeige der beiden Versorgungsquellen und des Netzdrucks, Drucküberwachung mit Kontaktgebern, zweistufige Druckreduzierung, zweite Stufe doppelt ausgelegt, mit Kontrollmanometern, Hochdruck- und Niederdruck-Kontaktgebern und Noteinspeisemöglichkeit (NIST,) komplett montiert auf Montageplatte, Gehäuse mit

Sichtfenster