


## Ventus evo 2, 4-6fach S

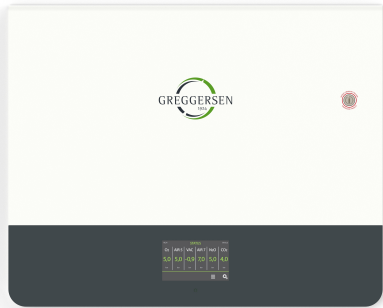

**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 902253

### Beschreibung

Ventus evo 2 – Bereichskontroll- und Absperreinheit 4-6fach für medizinische Gase und Vakuum

ohne Sichtfenster und mit Schloss & Schlüssel

Ventus evo 2 ist eine Bereichskontroll- und Absperreinheit gemäß DIN EN ISO 7396-1 und HTM 02-01 zur zuverlässigen Überwachung und Kontrolle medizinischer Gase und Vakuum.

Für die Aufnahme von bis zu sechs Ventileinsätzen (separat erhältlich) ausgelegt.

Gewährleistet eine sichere Durchleitung der jeweiligen Medien.

Die integrierte Drucküberwachung erfolgt über Sensoren; zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Absperrung im Not- oder Montagefall sowie zur Noteinspeisung über einen NIST-Anschluss.

Die Überwachung der Betriebszustände sowie die Ausgabe von Alarm- und Warnmeldungen erfolgen über den integrierten Bereichsmonitor. Ein On-Board-Relais zur Sammelstörmeldung ist serienmäßig integriert.

### Technische Daten

Netzanschluss: 230 V, 50 Hz  
Bauform: Unterputz- / Hohlwandmontage  
Putzausgleich: max. 25 mm  
Maße Vorderteil (B × H × T): 612 × 492 × 17,5 mm  
Maße Hinterteil (B × H × T): 568 × 470 × 70,5 mm  
Medizinprodukt: Klasse IIa

Konfiguration

Gas 1: #### bitte angeben! ####  
Gas 2: #### bitte angeben! ####  
Gas 3: #### bitte angeben! ####

Gas 4: #### bitte angeben! ####  
Gas 5: #### bitte angeben! ####  
Gas 6: #### bitte angeben! ####

Sprache: deutsch  
Druckeinheit: bar  
Sensoreingänge: -1 bis +6 bar  
Alarmgrenzen O<sub>2</sub>, AIR, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>: 500 kPa ± 20 %  
Alarmgrenze MA4: 400 kPa ± 20 %  
Alarmgrenze VAC: -40 kPa  
Alarmgrenze AIR-800: 800 kPa ± 20 %  
Alarmgrenze SA7: 700 kPa ± 20 %  
Türalarm: ja / nein  
Relaismodul: nein / 1 / 2  
Modbus-Modul: ja / nein  
Netzwerk: aktiviert / nicht aktiviert

Eigenschaften

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Sichtfenster    | ohne Sichtfenster       |
| Ventus Variante | 4-6 Gase                |
| Verschluss      | mit Schloss & Schlüssel |