


Ventus evo 2, 4-6fach F

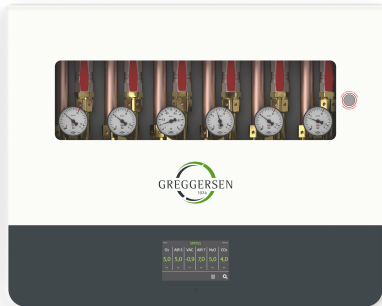

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902256

Beschreibung

Ventus evo 2 – Bereichskontroll- und Absperreinheit 4-6fach für medizinische Gase und Vakuum

mit Sichtfenster und mit Druckknopf ohne Schlüssel

Ventus evo 2 ist eine Bereichskontroll- und Absperreinheit gemäß DIN EN ISO 7396-1 und HTM 02-01 zur zuverlässigen Überwachung und Kontrolle medizinischer Gase und Vakuum.

Für die Aufnahme von bis zu sechs Ventileinsätzen (separat erhältlich) ausgelegt.

Gewährleistet eine sichere Durchleitung der jeweiligen Medien.

Die integrierte Drucküberwachung erfolgt über Sensoren; zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Absperrung im Not- oder Montagefall sowie zur Noteinspeisung über einen NIST-Anschluss.

Die Überwachung der Betriebszustände sowie die Ausgabe von Alarm- und Warnmeldungen erfolgen über den integrierten Bereichsmonitor. Ein On-Board-Relais zur Sammelstörmeldung ist serienmäßig integriert.

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Bauform: Unterputz- / Hohlwandmontage

Putzausgleich: max. 25 mm

Maße Vorderteil (B × H × T): 612 × 492 × 17,5 mm

Maße Hinterteil (B × H × T): 568 × 470 × 70,5 mm

Medizinprodukt: Klasse IIa

Konfiguration

Gas 1: ### bitte angeben! ###

Gas 2: ### bitte angeben! ###

Gas 3: ### bitte angeben! ###

Gas 4: ### bitte angeben! ###

Gas 5: ### bitte angeben! ###

Gas 6: ### bitte angeben! ###

Sprache: deutsch

Druckeinheit: bar

Sensoreingänge: -1 bis +6 bar

Alarmgrenzen O₂, AIR, N₂O, CO₂, N₂: 500 kPa ± 20 %

Alarmgrenze MA4: 400 kPa ± 20 %

Alarmgrenze VAC: -40 kPa

Alarmgrenze AIR-800: 800 kPa ± 20 %

Alarmgrenze SA7: 700 kPa ± 20 %

Türalarm: ja / nein

Relaismodul: nein / 1 / 2

Modbus-Modul: ja / nein

Netzwerk: aktiviert / nicht aktiviert

Eigenschaften

Sichtfenster	mit Sichtfenster
---------------------	------------------

Ventus Variante	4-6 Gase
------------------------	----------

Verschluss	mit Druckknopf
-------------------	----------------