


Filtertafel G1 Druckluft

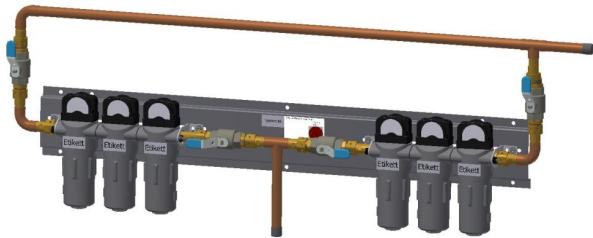

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903520

Beschreibung

Filtertafel Gr.1 Druckluft

Filtereinheit für medizinische Druckluft bis 50 m³/h

Zur Verwendung in einem Versorgungssystem mit Druckluftkompressoren gemäß DIN EN ISO 7396-1.

Druckluftaufbereitung durch Filterkombination bestehend aus Vorfilter, Aktivkohlefilter und Bakterienfilter. Redundanter Aufbau der Filterstufen. Dadurch ist der Filterwechsel bei Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung der Druckluftversorgung möglich.

Lieferumfang besteht aus:

1 Stufe: Feinfilter zum Ausscheiden von feinsten Verunreinigungen

Wirkungsgrad 99,99% bei 0,01µ, Restölgehalt bis zu 0,01mg/m³

2. Stufe: Aktivkohlefilter zum Binden von Gerüchen und

Geschmackstoffen. Wirkungsgrad 99,99% bei 0,01µ,

Restölgehalt bis zu 0,005mg/m³

3. Stufe: Bakterienfilter zum Filtern von Bakterien und Keimen

Wirkungsgrad 99,99% bei 0,01µ

4 Kugelhähne 3/4"

Anschluss- und Verbindungsleitungen Kupferrohr 22mm

1 Wandmontageplatte 1100 x 150mm (BxH) und Rohrschellen

Technische Daten:

Leistung: 50 m³/h bei 700 kPa (7 bar)

Eingangsdruck: max. 1600 kPa (16 bar)

Abmessungen: 1300 x 500 x 120mm (BxHxT) inkl. Filter

Anschluss: Kupferrohr Ø 22x1 mm

Gewicht ca.: 25 kg