


Filtertafel G1 Vakuum

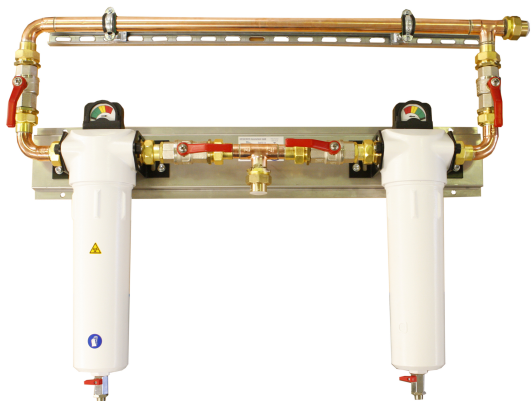

Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903510

Beschreibung

Filtertafel Gr.1 Vakuum

Bakterien-Doppelfilterstufe

bis 65 m³/h Vakuum

Zum Schutz des Vakuumbehälters und der Pumpen vor Verunreinigungen mit Mikroorganismen und Fremdpartikeln sowie zur Filterung der angesaugten Abluft.

Zur Verwendung einer medizinischen Vakuumversorgungsanlage gemäß DIN EN ISO 7396-1.

Redundanter Aufbau der Filterstufe. Dadurch ist der Filterwechsel bei Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung der Vakuumversorgung möglich.

Lieferumfang besteht aus:

4 Kugelhähne 1"

2 Bakterienfilter mit angebautem Sekret-Glas

1 Wandmontageplatte 1100 x 150mm (BxH) und Rohrschellen
für Leitungshalterung

Anschluss- und Verbindungsleitungen Kupferrohr 28mm

Technische Daten:

Leistung: 65 m³/h

Abmessungen: 1150 x 900 x 150mm (BxHxT) inkl. Filter

Anschluss: Kupferrohr Ø 28x1,5mm

Wirkungsgrad: 99,99% bei 0,01µ

Gewicht ca.: 20 kg